

MÁY MASSAGE NGÂM CHÂN
NEVATO NVF612



Cảm ơn Quý khách hàng đã tin dùng các sản phẩm của Nevato. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, đặc biệt là những lưu ý để sử dụng máy massage đúng cách.



Hãy giữ sổ hướng dẫn sử dụng để xem thêm khi cần.

Những người sau đây sẽ tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ


(Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ để được gợi ý và hướng dẫn trước khi sử dụng nếu người dùng có những bệnh hoặc triệu chứng dưới đây)

- Bệnh nhân tâm thần
- Bệnh nhân sử dụng máy để hô hấp
- Bệnh nhân suy tim và tăng huyết áp
- Bệnh nhân chưa hồi phục sau xuất huyết não
- Bệnh nhân bị bệnh máu khó đông, nhiễm trùng huyết
- Phụ nữ có kinh hoặc phụ nữ đang mang thai
- Người nhạy cảm với sự tăng giảm nhiệt độ
- Những người bị viêm, chấn thương và đóng vảy ở chân
- Trẻ em và người khuyết tật được phép sử dụng sản phẩm dưới sự hỗ trợ của người trưởng thành


CẤU TẠO CỦA MÁY:

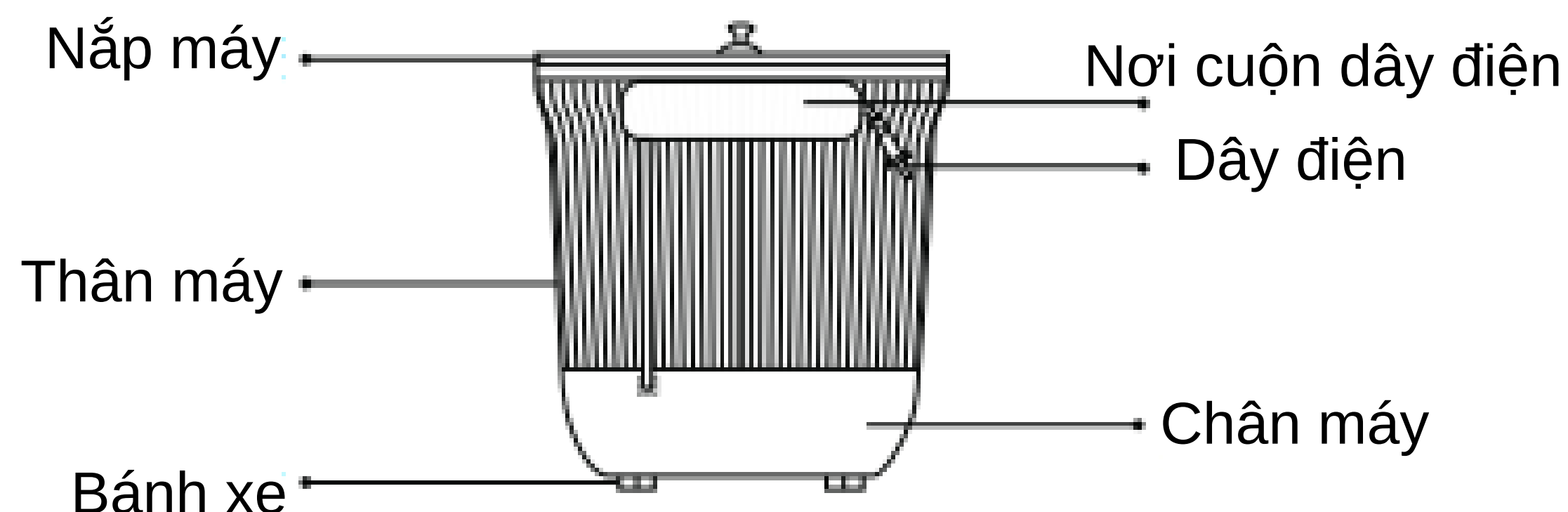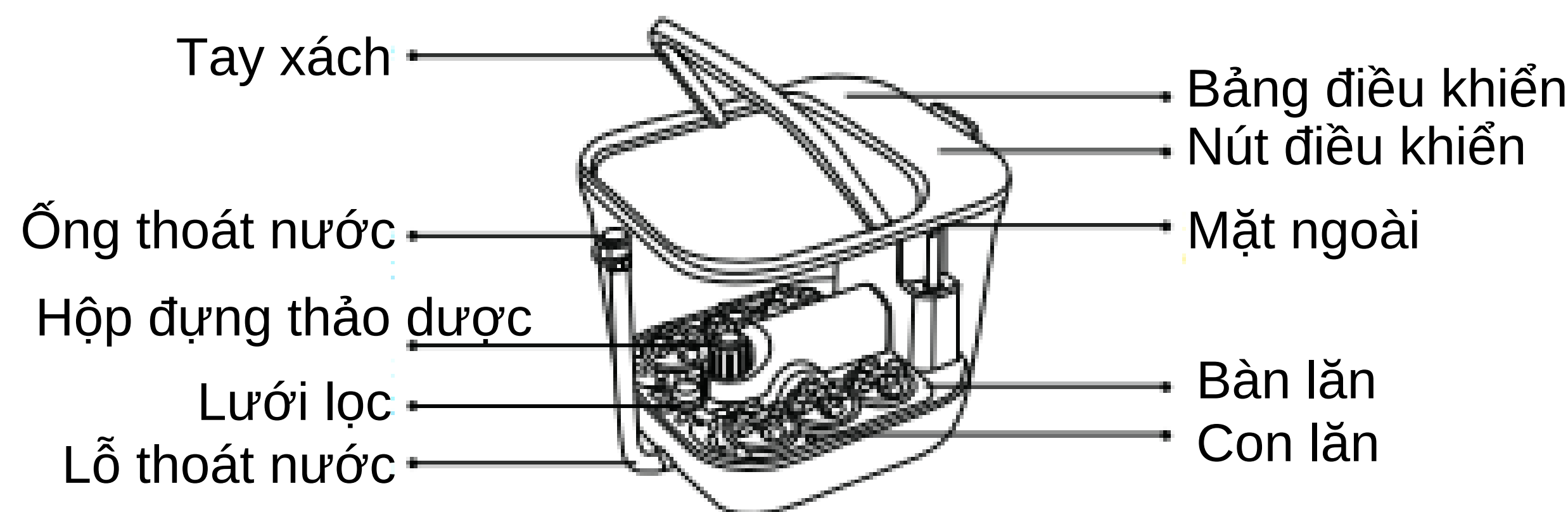

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

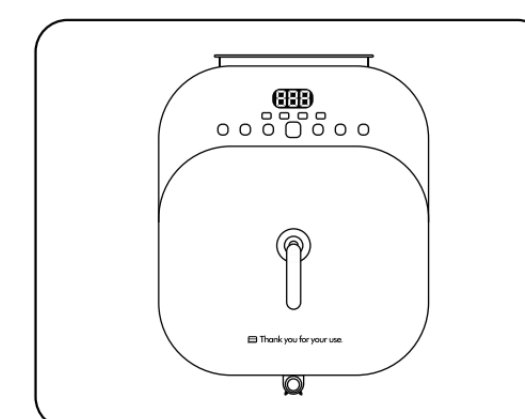



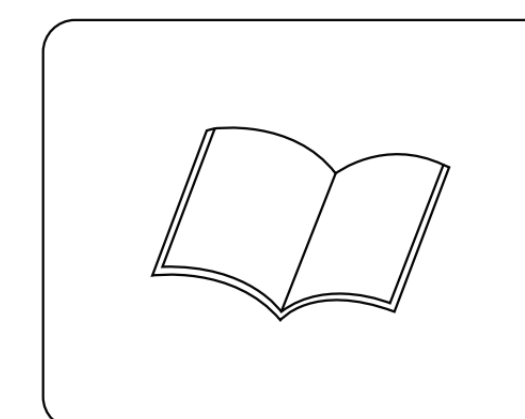




1. Máy Nevato
NVF612



2. Hướng dẫn
sử dụng

BẢNG ĐIỀU KHIỂN


1. Khởi động : Bật/tắt máy massage
2. Đổi chế độ : Chuyển đổi các chế độ massage Health/ Sleep/ Comfort/ Slim
3. Tăng nhiệt độ + : Tăng nhiệt độ nước
4. Giảm nhiệt độ - : Giảm nhiệt độ nước
5. Hẹn giờ : Tối đa 60 phút, mỗi lần 10 phút
6. Nút massage : Bật/tắt hoạt động của con lăn
7. Đèn UV : Bật/tắt đèn diệt khuẩn


Chú ý


- ▶ Vui lòng không bắn nước hoặc chất lỏng khác vào bảng điều khiển
- ▶ Vui lòng không nhấn mạnh phím để tránh sai chương trình

CÁCH SỬ DỤNG MÁY

Sau khi cắm điện, màn hình sẽ sáng lên, các nút chức năng được bật sáng. Khởi động bằng một phím bấm và tính năng khử trùng thông minh sẽ được bật cùng nhau:

1. Khởi động: Sau khi cắm điện, nhấn  màn hình sẽ hiển thị nhiệt độ nước hiện tại. Đèn chính và đèn báo sức khỏe sáng và đèn khử trùng tắt. Nhiệt độ mặc định là 42°C.

2. Tăng nhiệt độ +: Nhấn  , nhiệt độ nước sẽ tăng 1°C trong mỗi lần nhấn và nhiệt độ tối đa sẽ là 48 °C. Nhiệt độ nước thực tế sẽ được hiển thị lại sau 3 giây.

3. Giảm nhiệt độ -: Nhấn  , nhiệt độ nước sẽ giảm 1°C trong mỗi lần nhấn và nhiệt độ tối thiểu sẽ là 35 °C. Nhiệt độ nước thực tế sẽ được hiển thị sau 3 giây.

4. Đổi chế độ: Chế độ "**Health**", nhiệt độ mặc định là 42°C và bàn xoay liên tục. Chế độ "**Sleep**", nhiệt độ mặc định là 40 °C và chế độ xoay là quay 3 lần dừng 1 lần. Chế độ "**Comfort**", nhiệt độ mặc định là 43 °C và chế độ xoay là quay 6 lần dừng 2. Chế độ "**Slim**", nhiệt độ mặc định là 45 °C và chế độ xoay là quay 8 lần dừng 3 lần.

5. Hẹn giờ: Mỗi lần nhấn sẽ tăng 10 phút, tối 60 phút

6. Massage: Nhấn  để con lăn bắt đầu xoay và nhấn thêm một lần nữa để dừng lại.

7. Đèn UV: Nhấn để khởi động đèn diệt khuẩn

CHÚ Ý

- Hãy đựng thảo dược bằng túi vải và cho vào hộp đựng thảo dược bên trong của thiết bị không bị cặn bẩn làm tắc nghẽn.
- Không được phép sử dụng thiết bị khi không có nước, nếu không có thể làm hỏng thiết bị hoặc gây nguy hiểm.
- Không được sử dụng thiết bị khi đứng để không làm hỏng thiết bị và gây nguy hiểm.
- Không cắm điện khi tay ướt và không để thiết bị ở bất kỳ nơi nào gần lửa.
- Không giữ và sử dụng thiết bị trong phòng tắm hoặc hồ bơi.
- Khi nhiệt độ môi trường thấp hơn 0 °C, vui lòng không giữ nước bên trong để không làm đông cứng các bộ phận máy.
- Vui lòng ngừng sử dụng khi bạn cảm thấy không thoải mái (ví dụ: chóng mặt, nhức đầu, v.v.)
- Vui lòng không di chuyển thiết bị khi đang sử dụng để không gây cháy.
- Chất lỏng bị rò rỉ khỏi thiết bị, vui lòng ngừng sử dụng thiết bị.
- Ngừng sử dụng ngay lập tức nếu có bất kỳ sự cố hoặc tình trạng bất thường nào. Vui lòng tham khảo ý kiến hoặc liên hệ với trung tâm bảo hành để sửa chữa, không tự ý tháo dỡ khi chưa được phép.
- Bề mặt sẽ nóng lên; nó bị cấm đối với những người không nhạy cảm với nhiệt.
- Sau khi sử dụng, vui lòng tắt máy và rút phích cắm

BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA

- Trước khi vệ sinh, hãy đảm bảo rằng nguồn điện đã được ngắt và phích cắm đã được rút ra.
- Sử dụng vải mềm để lau và làm sạch bề mặt sản phẩm.
- Lau sạch vị trí bồn bằng khăn ướt hoặc bằng dung dịch trung tính, sau đó dùng vải khô để lau.
- Giữ sản phẩm sạch sẽ và tránh xa những nơi có độ ẩm cao, nhiệt độ cao hoặc môi trường có nhiệt độ cao.
- Vui lòng không cắm và rút phích cắm khi tay ướt.
- Vui lòng không dội nước vào sản phẩm hoặc làm bắn nước hoặc chất lỏng khác vào bên trong sản phẩm.
- Không sử dụng chất tẩy ăn mòn, chẳng hạn như benzen hoặc chất pha loãng, để làm sạch sản phẩm, nếu không sản phẩm có thể bị phai màu và có thể bị ăn mòn và nứt gãy.
- Không nên để ở nơi có ánh nắng trực tiếp hoặc nhiệt độ cao vì có thể làm sản phẩm bị phai màu.

LỜI NHẮC

- Không sử dụng trong phòng tắm hoặc những nơi khác ẩm ướt. Nếu sản phẩm rơi vào nước, vui lòng gửi nó đến công ty hoặc đại lý của chúng tôi để sửa chữa.
- Nên sử dụng sản phẩm ở môi trường có nhiệt độ 0-40 °C.
- Không cất giữ hoặc sử dụng sản phẩm gần lò sưởi hoặc bếp điện và tránh ánh nắng mặt trời.

LỜI NHẮC

CẢNH BÁO


- Vui lòng ngừng sử dụng sản phẩm trong bất kỳ điều kiện nào ở trên để tránh hỏng hóc và sự cố.
- Ngắt nguồn điện và rút phích cắm và liên hệ với đại lý hoặc công ty của chúng tôi.
- Không nên tự ý tháo gỡ và sửa chữa sản phẩm

NHẮC NHỞ

Nên rửa phần bên trong sau khi sử dụng để tránh phát sinh vi khuẩn.

Sản phẩm đã được tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt với nước. Có thể có ít nước bên trong thùng, điều này là bình thường và sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN

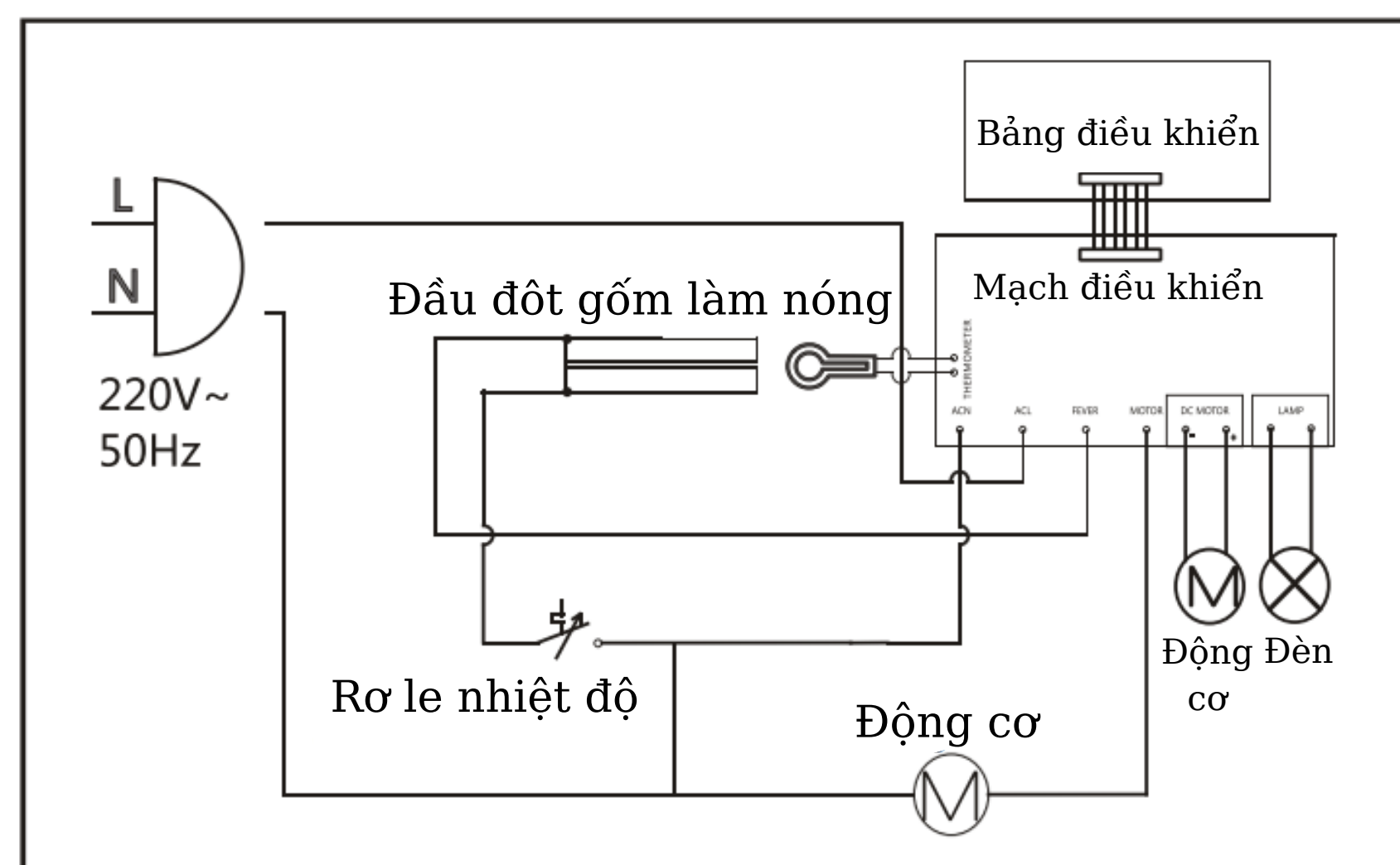

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

Lỗi	Lý do	Cách xử lý
Không có điện	- Chưa cắm điện - Chưa bật nút nguồn	Cắm vào ổ và bật nút nguồn. Liên hệ với chúng tôi nếu vẫn không được
E1	Nhiệt độ nước vượt quá 53 °C	Rút phích cắm điện khi nhiệt độ nước xuống dưới 53 °C rồi cắm lại nguồn để sử dụng tiếp
E2	Cảm biến nhiệt độ không hoạt động	Liên hệ với người bán để thay thế và sửa chữa

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	NVF612	Nguồn điện	220V
Tần số	50Hz	Công suất	800W
Hiệu suất nhiệt	>60%	Khả năng chống nước	IPX4
Nhiệt độ tối đa	48°C	Chế độ hiển thị	Đèn LED
Chế độ làm nóng	Làm ấm nước bằng gốm	Chế độ hoạt động	Cảm ứng
Tiêu chuẩn hiện hành	GB4706.10-2008 GB4706.1-2005		

Cảm ơn vì đã lựa chọn. Chúng tôi mong rằng dịch vụ của chúng tôi sẽ mang lại sự tiện lợi và niềm vui cho bạn và gia đình.

XÁC ĐỊNH CÁC CHẤT GÂY HẠI

Nhận dạng sản phẩm



Thời hạn (10 năm) cho biết sản phẩm điện có chứa một số chất độc hại nhất định và có thể được sử dụng có thời hạn để bảo vệ môi trường. Nó sẽ được hệ thống tái chế xử lý sau thời gian này.

Các chất có hại có thể có trong sản phẩm

Theo các Chính sách về "Hạn chế sử dụng các chất nguy hiểm trong sản phẩm Điện và Điện tử" của Trung Quốc, bảng sau liệt kê tên và nội dung của các chất hoặc nguyên tố độc hại có thể có trong các sản phẩm điện và điện tử



Tên thành phần	Các chất độc hại					
	Chì (Pb)	Thủy ngân (Hg)	Cadmi (Cd)	Hexavalent chromium (Cr(VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
PCB	×	○	○	○	○	○
Vỏ nhựa	○	○	○	○	○	×
Dây điện	×	○	○	○	○	○
Lớp sơn	○	○	○	×	○	○
Đinh ốc	○	○	○	×	○	○
Bao bì	×	○	○	○	○	○
Khác						

Bảng trên dựa theo quy định của SJ / T 11364.

○: Cho biết hàm lượng các chất độc hại như vậy trong chất liệu sản phẩm có nằm trong giới hạn quy định của GB / T26572.

X: Chỉ ra rằng hàm lượng các chất độc hại đó trong ít nhất một chất liệu vượt quá giới hạn của quy định GB / T26572.

Lưu ý: Chúng tôi sẽ sử dụng vật liệu không chứa các chất độc hại nêu trên trong khả năng cho phép. Chúng tôi sẽ cố gắng phát triển và tìm cách loại bỏ các thành phần độc hại ra khỏi sản phẩm một cách tối ưu nhất.

THẺ BẢO HÀNH

1. Thời gian bảo hành sản phẩm của chúng tôi sẽ là một năm (kể từ ngày mua). Trong thời gian bảo hành, công ty chúng tôi sẽ bảo trì miễn phí đối với những hỏng hóc do chất lượng trong quá trình vận hành của máy.
2. Trong thời gian bảo hành, nếu có bất kỳ hỏng hóc nào do chất lượng, quý khách vui lòng mang theo phiếu bảo hành đến trung tâm bảo hành ủy quyền của chúng tôi để được bảo dưỡng miễn phí.
3. Phiếu bảo hành sẽ không có giá trị đối với bất kỳ thay đổi nào và thời gian bảo hành sẽ hết hiệu lực ngay lập tức.
4. Phiếu bảo hành sẽ là phiếu mua hàng, vui lòng bảo quản đúng cách và không được cấp lại nếu mất.

Các điều kiện sau sẽ không nằm trong phạm vi bảo trì miễn phí:

- A. Không có phiếu bảo hành
- B. Hỏng hóc do không vận hành thiết bị theo hướng dẫn sử dụng
- C. Thiệt hại do việc tự ý tháo lắp không có ý kiến của nhân viên
- D. Đổ vỡ, trầy xước hoặc hư hỏng do di chuyển hoặc rơi xuống.
- E. Thiệt hại do bảo quản, bảo trì và vận hành không đúng cách.
- F. Thiệt hại do thiên tai



Vui lòng gửi phiếu này cho công ty để được bảo trì

Tên khách hàng	Nam <input type="checkbox"/> Nữ <input type="checkbox"/>
Tên sản phẩm	
Mã sản phẩm	
Số seri	
Người bán	
Ngày mua	
Nơi mua	
Địa chỉ khách hàng	
Mã bưu điện	
Số điện thoại	

THẺ BẢO HÀNH

Khách hàng vui lòng giữ phiếu này

Tên khách hàng		Nam <input type="checkbox"/>	Nữ <input type="checkbox"/>
Tên sản phẩm			
Mã sản phẩm			
Số seri			
Người bán			
Ngày mua			
Nơi mua			
Địa chỉ khách hàng			
Mã bưu điện			
Số điện thoại			



Thời gian bảo hành

Chứng nhận

Số hiệu kiểm tra:

Ngày sản xuất: